

ELITEX

MAGIC PLASMA

Lựa chọn tối ưu cho máy điều trị da giải quyết nhiều vấn đề da liễu.



Săn chắc da



Kích thích mọc tóc
& chăm sóc da đầu



Giảm mụn
& mờ sẹo

8 LOẠI
TIPS





8 LOẠI ĐẦU TIP THAY THẾ

Bộ 11 món

**GIẢI PHÁP PHÙ HỢP
CHO NHIỀU NHU CẦU LÀM ĐẸP KHÁC NHAU.**

ƯU ĐIỂM CỦA TAY CẦM

Thiết kế chuẩn xác, dành cho chuyên gia.



Đèn LED trạng thái thời gian thực

Hiển thị trực quan giúp đảm bảo vận hành an toàn.



Tay cầm chống trượt

Thiết kế cầm nắm thoải mái, hỗ trợ thao tác chính xác cho các liệu trình như nâng vùng mắt.



Nút điều chỉnh khí R-Mode

Điều chỉnh chính xác lưu lượng plasma và cường độ năng lượng cho các liệu trình cá nhân hóa.



Thiết kế dạng mô-đun, tối ưu công thái học



Thay đầu dò không cần dụng cụ

Dễ dàng chuyển đổi giữa 8 đầu gắn chuyên dụng.



Chất liệu gốm & vật liệu y tế cao cấp

Chịu nhiệt, chống ăn mòn và bền bỉ theo thời gian.



Độ bền & vệ sinh




Công tắc chuyển chế độ plasma lạnh/nhiệt

Chuyển chế độ chỉ với một chạm, đáp ứng đa dạng ứng dụng.



ĐẦU PLASMA VUÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO

Giảm nếp nhăn li ti Cải thiện kết cấu da Kích thích mọc tóc

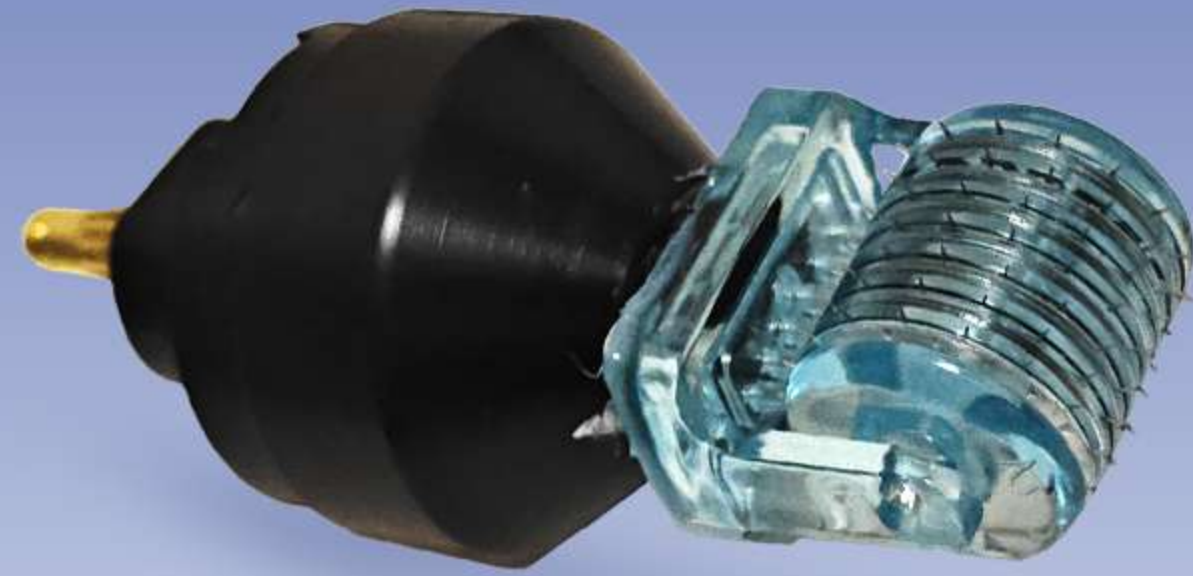


ĐẦU LĂN KHÍ GAS

Tăng cường hấp thụ dưỡng chất Tái tạo làn da



ĐẦU VÒI PHUN

Kháng khuẩn Chống viêm Liệu trình điều trị mụn

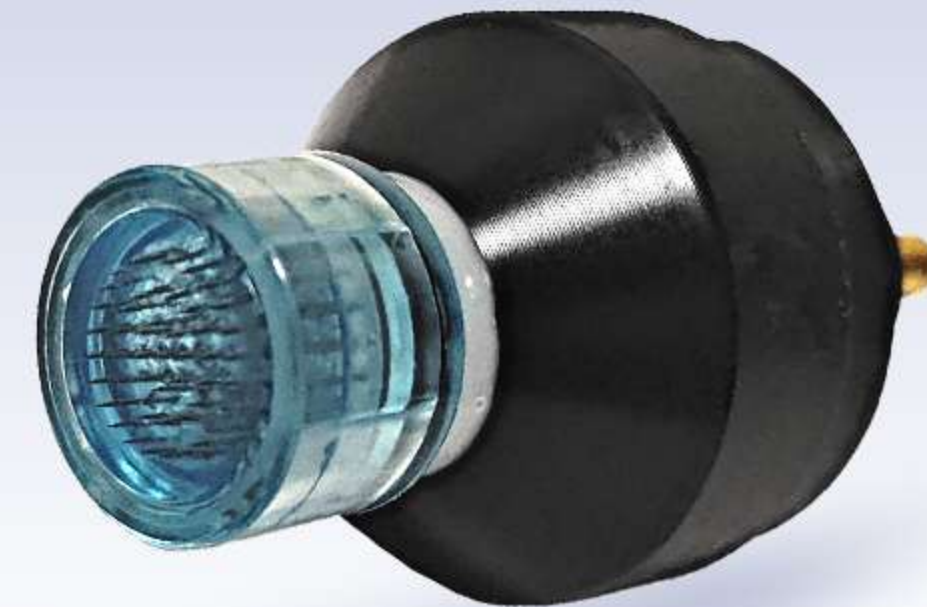

ĐẦU KIM KHÍ

Phân bố năng lượng plasma đồng đều Phù hợp cho vùng điều trị rộng



ĐẦU PLASMA DẠNG SỪNG

Cứu tinh cho da đầu
khỏe mạnh

Giảm gàu & chống viêm

Công thức điều trị cellulite



ĐẦU PLASMA GỐM

Điều trị nhiễm nấm và mụn

Thúc đẩy tái tạo da



ĐẦU KIM KIM CƯƠNG THẲNG/CONG

Nâng cơ cổ và nâng mí mắt

Săn chắc da mặt



SĂN CHẮC DA MẶT

Giảm sẹo mụn và sẹo bồng

Làm săn chắc và nâng cơ da



ƯU ĐIỂM

Plasma lạnh khí quyển cường độ thấp
Không giới hạn số lần phát xung

1 Hormesis an toàn, không thời gian nghỉ

Hơi gió nhẹ nhàng trong suốt liệu trình.
Không đau, không cần kem gây tê.

2 Plasma không xâm lấn

Liệu trình sử dụng hồ quang điện không gây
tổn thương da, có thể điều trị vùng rộng.

3 Phù hợp ngay cả với da nhạy cảm

Kết hợp hỗ trợ lành thương và rút ngắn
thời gian nghỉ dưỡng.

4 Thanh lọc da khỏi hệ vi sinh có hại

Không còn đỏ da và các vấn đề về
da mặt

5 Thải độc và tái tạo da

Liệu trình toàn diện giúp làn da tươi
mới và trẻ trung hơn

MÀN HÌNH 12.1 INCH



Màn hình gập



Cảm ứng nhạy



Hiển thị rõ nét

TRƯỚC VÀ SAU



THÔNG SỐ MÁY



MÔ TẢ	Thông số kỹ thuật
KHÍ PLASMA	Argon
NGUỒN ĐIỆN	110-220V
CÔNG SUẤT	100W
TRỌNG LƯỢNG	13KG (Net) / 22KG (Đóng gói)
KÍCH THƯỚC	404X310X180mm (Net) / 400X350X570mm (Đóng gói)

CÁC LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CỦA PLASMA LẠNH

- Phục hồi da đầu (kháng khuẩn, tái sinh nang tóc, tăng cường tuần hoàn máu)
- Thu nhỏ lỗ chân lông
- Tái tạo da
- Săn chắc da (hiệu ứng nâng cơ)
- Làm đều màu da
- Giảm nếp nhăn
- Nâng mí mắt và nâng chân mày
- Loại bỏ bọt mắt
- Loại bỏ quầng thâm mắt không do di truyền
- Loại bỏ mụn kê và u vàng mí mắt
- Loại bỏ mụn và sẹo
- Loại bỏ nếp nhăn vùng môi trên
- Chăm sóc môi giúp cân bằng độ pH da
- Hỗ trợ kiểm soát và cải thiện viêm da tiết bã
- Xóa đốm nâu do nắng và tuổi tác
- Săn chắc vùng ngực và cổ
- Hỗ trợ kiểm soát và giảm bùng phát vảy nến và viêm da cơ địa
- Loại bỏ nấm da và loại bỏ nhiễm trùng da
- Hỗ trợ ngăn ngừa các đợt dị ứng da
- Làm giảm tổn thương da và làm mịn bề mặt da
- Chỉnh sửa sẹo phẫu thuật
- Hỗ trợ quản lý và điều trị vết thương lâu lành
- Săn chắc mô da lỏng lẻo ở các vùng như tay, ngực, đùi trong, đầu gối, v.v.
- Loại bỏ nếp nhăn và khuyết điểm mu bàn tay
- Nứt da mãn tính ở tay và chân
- Hỗ trợ điều trị và kiểm soát mụn cóc, herpes, chai sừng, nhọt và áp-xe
- Hỗ trợ điều trị và phục hồi nấm móng

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Da đóng vai trò như một điện cực đối kháng.

Plasma lạnh được tạo trực tiếp trên bề mặt da.

Các loại khí hoạt hóa:
ozone, oxy



Tia UV-A và UV-B



Tạo plasma lạnh
trực tiếp bằng
nguyên lý hoạt
động di_CAP



Trường điện tần số cao kích thích



1-2mm

Tác động sâu
vào da



MAGIC PLASMA

Hoạt động bằng cách ion hóa khí để tạo ra các hồ quang điện nhỏ, giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng viêm – một trong những yếu tố thúc đẩy lão hóa da – đồng thời góp phần tái tạo và làm trẻ hóa làn da, mang lại vẻ khỏe mạnh và tươi trẻ. Trong quá trình thực hiện không gây đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng, giúp liệu trình trở nên nhanh chóng, đơn giản và an toàn, với biên độ an toàn cao và ít nguy cơ tác dụng phụ đáng kể.