

VI KIM **RF** FRACTIONAL

Nâng cơ mặt

Làm săn chắc da

Giảm nếp nhăn

Thu nhỏ lỗ chân lông

Sẹo mụn

Sẹo

Vết rạn da


...

MIDAS




HOW IT WORKS

STEP 01

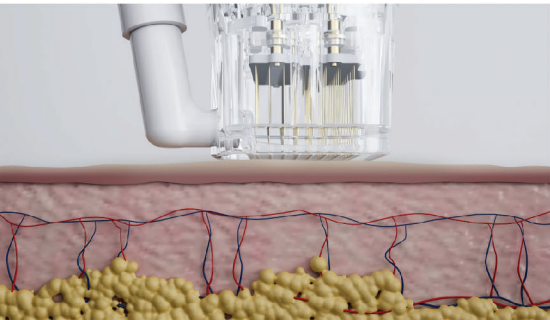


Đầu kim siêu nhỏ tạo vi điểm tiếp xúc hoàn hảo với da.

STEP 02

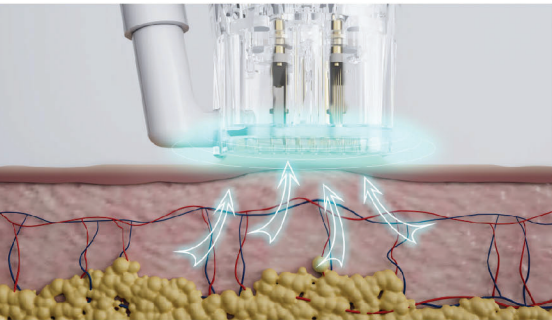


Vùng da tại khu vực điều trị được hút lên bởi lực hút chân không của tay cầm.

STEP 03

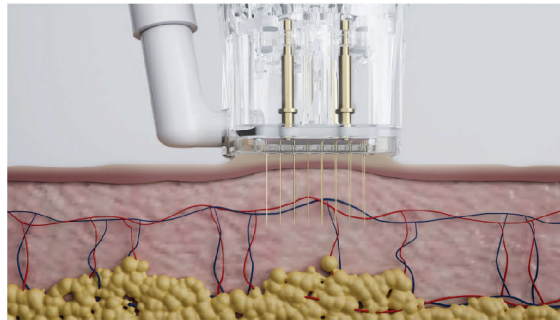


Kim siêu nhỏ xuyên qua da một cách nhẹ nhàng, giảm thiểu đau đớn.

STEP 04

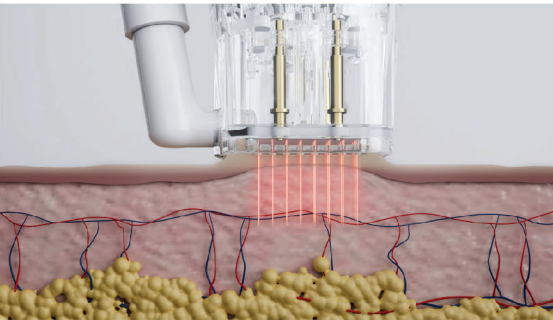

Năng lượng RF lưỡng cực tác động đến cấu trúc mô

STEP 05

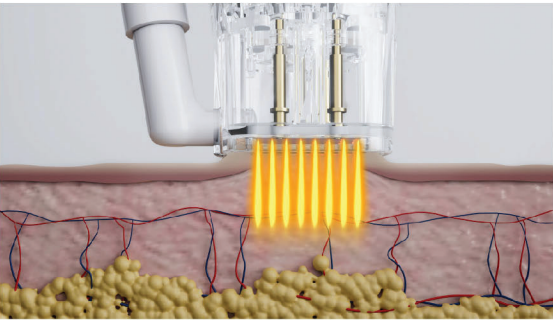


Quá trình tái tạo collagen và sản sinh elastin mới bắt đầu.



Before After



Before After

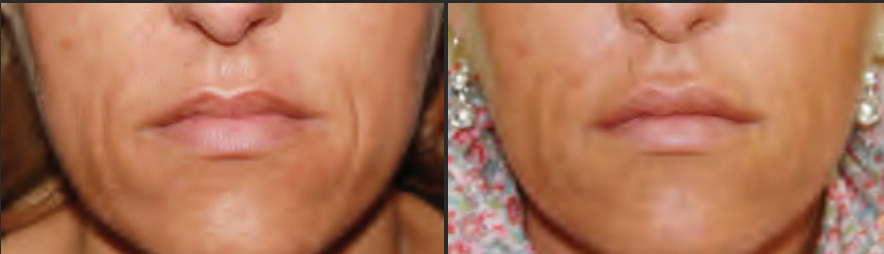

Before After



Before After



Before After



Before After






TAY CẮM ĐẦU VI KIM RF

Đầu vi kim được trang bị động cơ Haydon của Mỹ mang lại khả năng đưa kim vào da mượt mà, giúp việc điều trị nhẹ nhàng, thoải mái cho cả người thực hiện lẫn bệnh nhân.

ĐẦU CARTRIDGES

Tùy chỉnh độ sâu 0.1mm-4mm

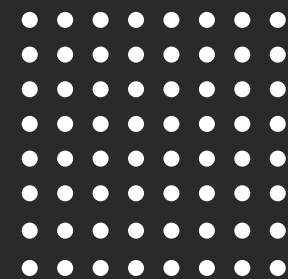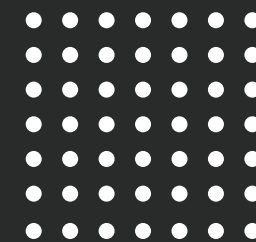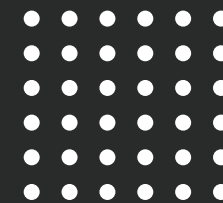

10 PINS

Vùng mắt và mũi



25 PINS

Vùng mặt



36 PINS

Kim vùng mặt



49 PINS

Vùng cánh tay
và chân




64 PINS

Dùng cho
body

LINH HOẠT LỰA CHỌN LOẠI KIM


Microderm Pro thiết kế phù hợp cho cả kim cách điện và kim không cách điện, ứng dụng điều trị cho mọi loại da.

KIM KHÔNG CÁCH ĐIỆN

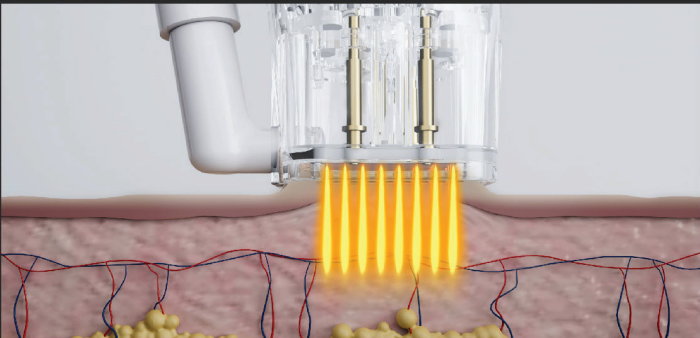

Kim siêu nhỏ không cách điện phát ra năng lượng tần số vô tuyến trên toàn bộ bề mặt tiếp xúc, làm nóng đồng thời các lớp da mà kim xuyên qua

KIM CÁCH ĐIỆN

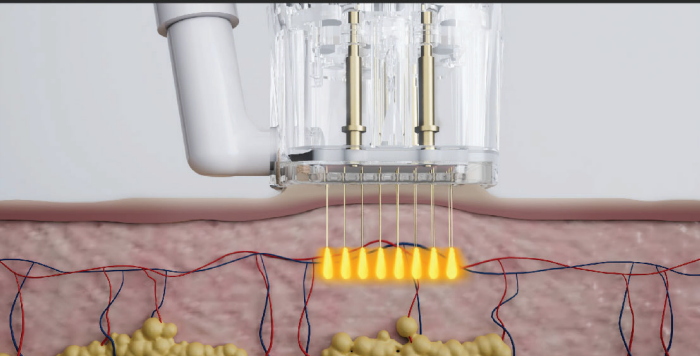

Kim cách điện chỉ phát truyền năng lượng ở đầu kim, bảo vệ lớp biểu bì do lượng nhiệt không bị phân tán, tác động năng lượng sóng vô tuyến chính xác ở lớp trung bì và hạ bì mang lại hiệu quả cao hơn.

KIM MẠ VÀNG

Thép không gỉ và các sản phẩm mạ vàng có độ bền tuyệt vời, đồng thời kim có khả năng ngăn ngừa phản ứng dị ứng.

KIM MỎNG 0.18MM

Đường kính của kim chỉ là 0.18mm. So với hầu hết các loại kim 0.3mm trên thị trường, kim mỏng có thể giảm tổn thương biểu bì và mô dưới da, đồng thời đẩy nhanh quá trình phục hồi da.


Đầu kim siêu mảnh ở mức 0.01mm

TAY CẦM THERMAGE

Đầu máy RF không xâm lấn Thermagical được sử dụng để làm săn chắc da, chống nếp nhăn, nâng cơ, tạo hình và thậm chí giảm mỡ. Không cần thời gian nghỉ dưỡng và phục hồi.




4 KÍCH THƯỚC KHÁC NHAU

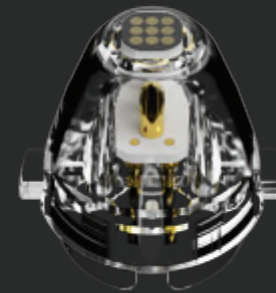


5x5mm

vùng mắt và mũi

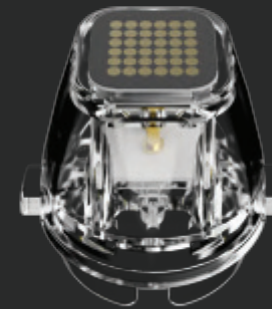


10x10mm

vùng mặt

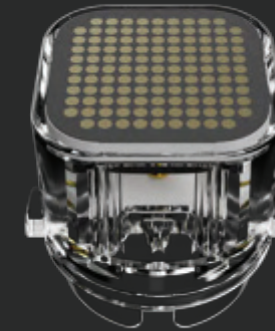

20x20mm

vùng cánh tay và chân

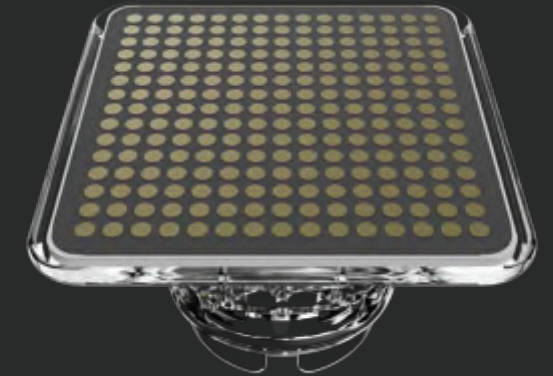

40x40mm



vùng body

Sử dụng bốn kích cỡ đầu điều trị khác nhau cho các vùng trên khuôn mặt và cơ thể.

5 MHZ

8 MHZ

Hai chế độ tần số đầu ra khác nhau là 5 MHz và 8 MHz, người dùng có thể chuyển đổi tần số đầu ra tùy ý theo các vùng điều trị khác nhau, và độ sâu của sóng RF có thể được điều chỉnh bằng cách chuyển đổi tần số đầu ra.

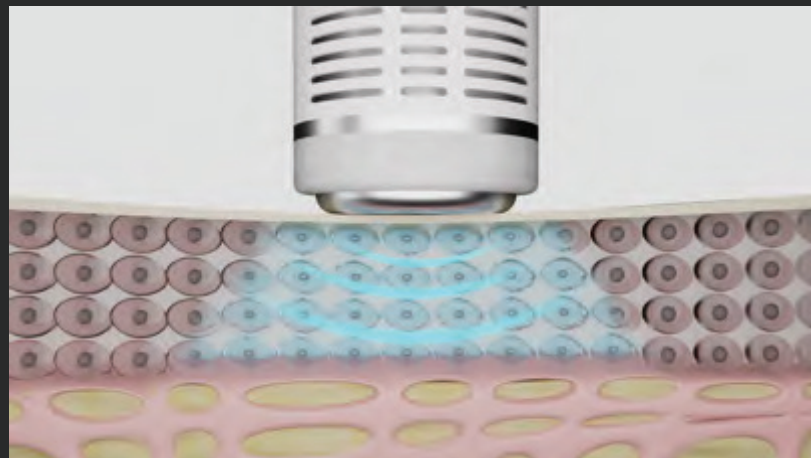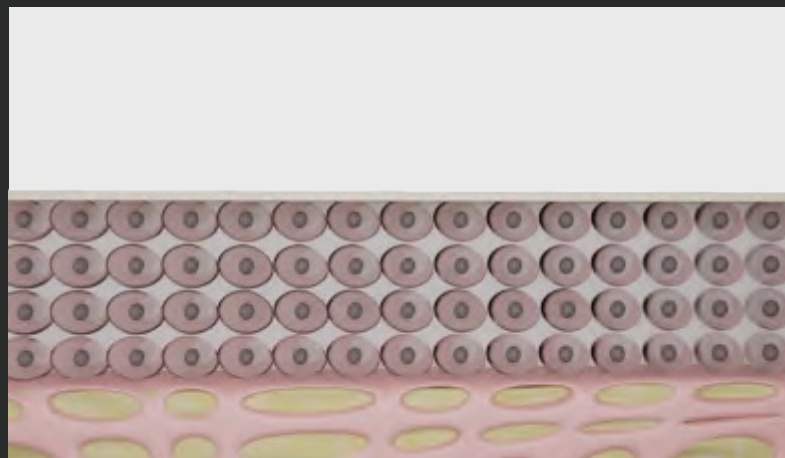

Tay cầm lạnh

Giảm đau, làm dịu da và thu nhỏ lỗ chân lông. Giảm xuất huyết sau phẫu thuật hiệu quả và giảm nguy cơ nám da.





Chip nhận dạng và cảm biến bên trong tay cầm có thể tự động phát hiện loại kim và độ sâu đầu ra của kim, đảm bảo an toàn và độ chính xác trong điều trị





Động cơ Haydon của Mỹ, tuổi thọ lên đến 10 năm



Bộ lọc nano có thể ngăn chặn việc hút bụi bẩn và dầu, bã nhờn trên da vào tay cầm.

Màn hình cảm ứng độ phân giải cao 15.6 inch

Hệ điều hành thân thiện với người dùng

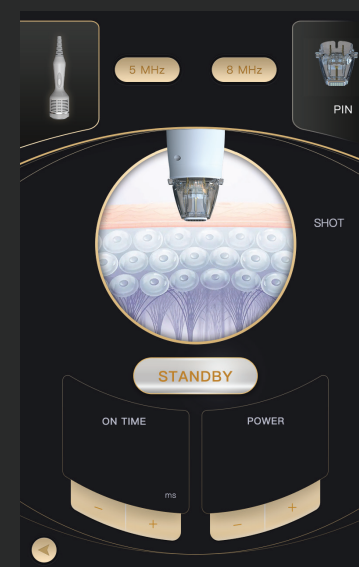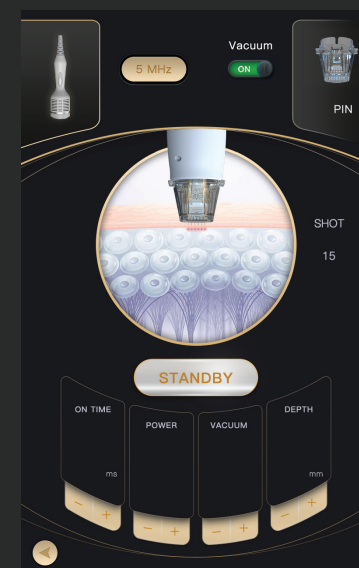



Thông số kỹ thuật

công suất:	400W
Tần số RF:	5MHz/8MHz
Màn hình:	15.6inch
độ rộng xung: :	Microneedling handle 250-600ms Thermagical handle 1000-3000ms
Độ sâu kim:	0-4mm
Cân nặng:	31kg
Nguồn điện:	AC220V±10% 50HZ , 110v±10% 60HZ

