

ELITEX

CE

ISO

FDA

Smooth

Máy Triệt Lông Diode Laser

**TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ
PHÂN TÍCH DA AI THẾ HỆ MỚI**


**5 ĐẦU ĐIỀU TRỊ!
NAM CHÂM**



4 BƯỚC SÓNG

755NM+808NM+940NM+1064NM



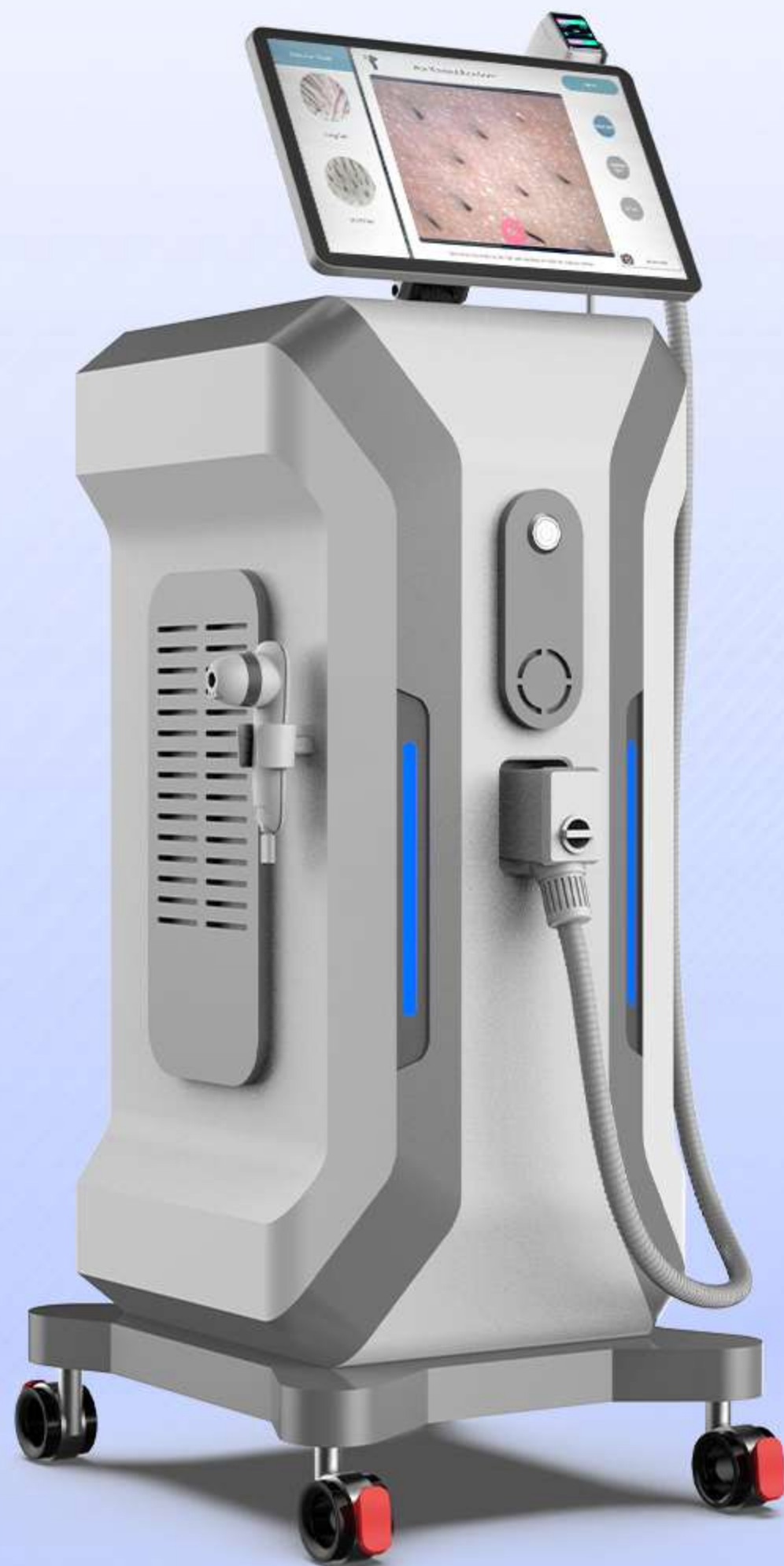

ƯU ĐIỂM

Tích hợp đa công nghệ trong cùng một thiết bị



AI 3D thể hệ mới
Công nghệ phân tích da



Hệ thống làm lạnh TEC
Làm lạnh TEC sâu tới -32°C



Đầu điều trị nam châm
5 kích thước



Hệ điều hành Android
Giao diện vận hành mượt mà, dễ sử dụng



Thanh Coherent
Nhập khẩu từ Mỹ



USB
Khóa bảo mật & nâng cấp hệ thống



4 bước sóng
755NM+808NM+940NM+1064NM




1200W
Công suất tay cầm

TAY CẦM

Đầu điều trị hút nam châm



5 ĐẦU ĐIỀU TRỊ NAM CHÂM

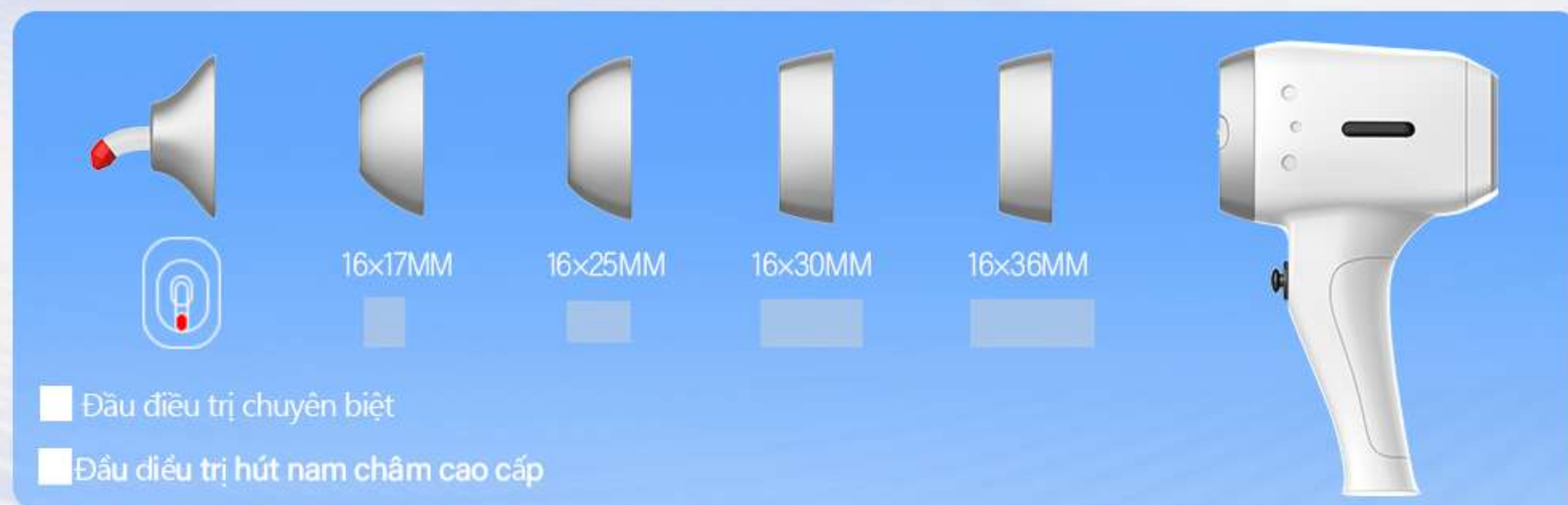



CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH DA AI

Tự động đề xuất thông số điều trị thông minh. Phân tích tự động tình trạng da và nang lông

Camera độ phân giải 2 triệu pixel



Thiết bị hỗ trợ chức năng phân tích da trước và sau liệu trình, giúp nâng cao tính chuyên nghiệp trong dịch vụ triệt lông.



4 BƯỚC SÓNG

755NM+808NM+940NM+1064NM

1200W CÔNG SUẤT LASER

HỆ THỐNG LÀM LẠNH TỐI ƯU

Lạnh sâu tới **-32°C**, hạn chế nóng rát
và bảo vệ da



Thanh Coherent
Nhập khẩu từ Mỹ



100 triệu shot
Số shot tay cầm



Màn hình 4k
Trên tay cầm



ĐẦU TIẾP XÚC



360°

THIẾT KẾ XOAY 360° & NAM CHÂM TIỆN LỢI

Dễ dàng tiếp cận các vùng khó thao tác như, bao gồm tai, cánh mũi, vùng giữa hai chân mày.



THANH COHERENT



COHERENT.

Chip laser
nhập khẩu từ Mỹ



**100
TRIỆU**

nhiều số lượng
xung laser



**4
BƯỚC SÓNG**

755nm\808nm
940nm\1064nm



150W

Công suất cao
mỗi bar



**CHẤT LƯỢNG
ỔN ĐỊNH**

Longer
service life



Cách nhiệt tối ưu

Độ bền cao

Vận hành êm ái

Ổn định lâu dài

Khả năng làm lạnh vượt trội

Trang bị hệ thống làm lạnh TEC tiên tiến giúp mang lại hiệu quả làm mát tối ưu. Thiết bị có thể hoạt động liên tục 24 giờ.

Tốc độ làm lạnh nhanh gấp 10 lần các thiết bị làm lạnh thông thường.




TÍCH HỢP CỔNG USB KHÓA AN TOÀN & NÂNG CẤP



Thiết lập thông số điều trị chỉ với một chạm

Giải pháp làm đẹp thông minh cho mọi mô hình kinh doanh

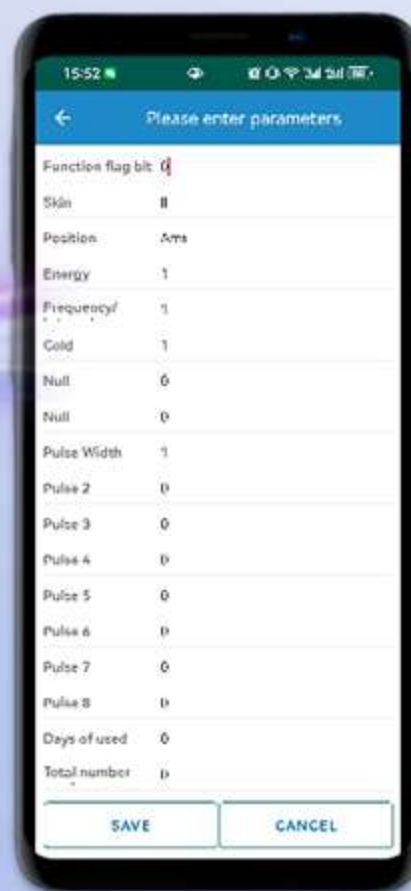

HỆ THỐNG KẾT NỐI INTERNET THÔNG MINH



Hệ thống điều khiển từ xa

Điều khiển từ xa mọi lúc, mọi nơi



Hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng

Quy trình vận hành đơn giản với thông số hiển thị rõ ràng

VẬN HÀNH ĐỒNG BỘ GIỮA TAY CẦM VÀ MÀN HÌNH

Đồng bộ dữ liệu thao tác của tay cầm với màn hình hiển thị





MÀN HÌNH 4K 15.6 INCH

Thông minh, Mượt mà, Dễ sử dụng



16 LỰA CHỌN NGÔN NGỮ

Tùy chỉnh giao diện chào mừng và logo hiển thị



Hệ điều hành Android



Chuẩn kết nối
không dây mới nhất



Bluetooth 5.0
thế hệ mới nhất

BEFORE & AFTER


Liệu trình nhanh chóng – nhẹ nhàng – hiệu quả



Before



After

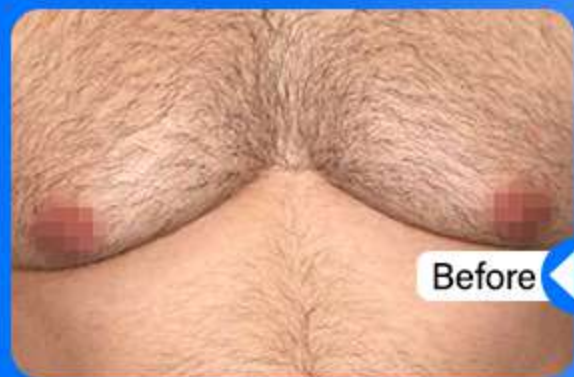

Before



After



Before



After



Before



After






THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BƯỚC SÓNG LASER	755nm+808nm+940nm+1064nm
MÀN HÌNH	15.6 inch (Android)
CÔNG SUẤT TAY CẦM	1200W
ĐỘ RỘNG XUNG	1-200ms
NĂNG LƯỢNG	1-150J/cm2
KÍCH THƯỚC ĐIỂM BẮN	16*17mm/16*25mm/16*30mm/16*36mm
TẦN SỐ	1-10Hz
NHIỆT ĐỘ SAPPHIRE ICE PLUS	ICE PLUS, -32°C
NGUỒN ĐIỆN	AC 230V, 50/60Hz
HỆ THỐNG LÀM MÁT	TEC + Nước + Gió + Bán dẫn

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

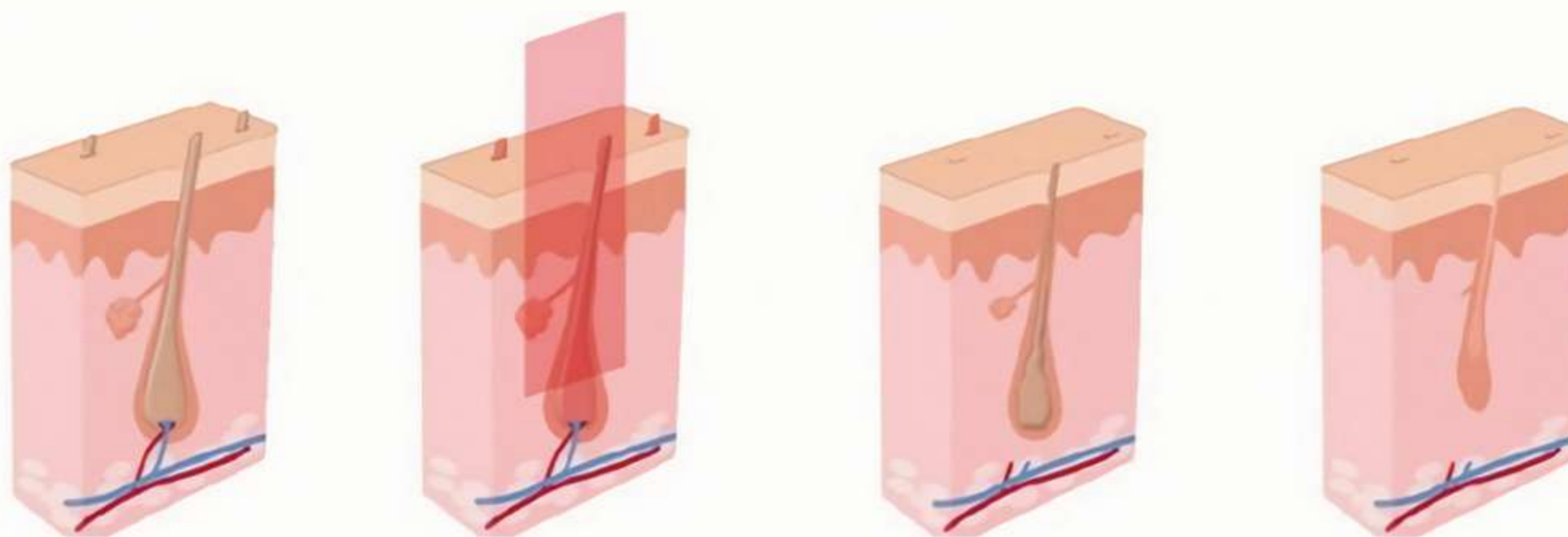


Cơ chế hoạt động của triệt lông laser?


Công nghệ triệt lông laser sử dụng tia laser tác động trực tiếp vào melanin trong nang lông. Melanin là sắc tố tạo nên màu sắc của sợi lông. Nhờ khả năng nhận diện melanin chính xác, tia laser sẽ làm nóng và phá hủy nang lông, từ đó giúp giảm lông hiệu quả và lâu dài.

**Đây là kết quả thực tế của liệu trình triệt lông.
Thường mất 3-5 lần để đạt hiệu quả loại bỏ lông lâu dài.**

Lần điều trị đầu tiên

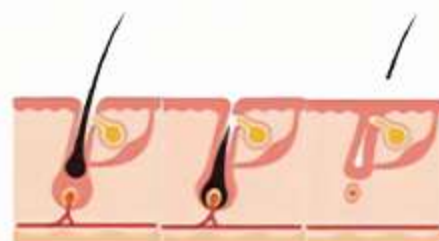

Lần điều trị thứ hai

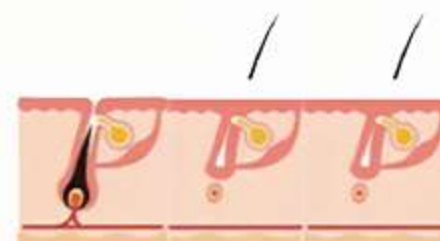

Lần điều trị thứ ba

